



D-TEK

 Etiqueta

Etiqueta del
producto

BRAINSOFT

Al pulsar el
botón accedes a
la pantalla de
inicio de sesión

Iniciar Sesión



Apagar



Mondragon
Unibertsitatea

Escuela Politécnica
Superior



nombre.apellido.XX

Nombre de usuario

larraitz.ortega14

Contraseña

Lainoa01



Iniciar sesión



Apagar

- Carácter en letra mayúscula
- Carácter en letra minúscula
- 2 dígitos numéricos

Nuevo diagnóstico

Para realizar un
nuevo diagnóstico



Instrucciones

Diagnósticos anteriores

Para ver diagnósticos
anteriores



Cerrar sesión

CARGAR IMAGEN

DIAGNÓSTICO

DATOS



D-TEK

Caracteres
numéricos

ID Paciente

0

ID Imagen

0

Fecha de diagnóstico

dd.mm.yyyy

Botón para cargar la
imagen, se abrirá el
explorador de
archivos

Se activa una pantalla
desplegable para
seleccionar la fecha

May 2023

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Nombre y apellidos
del especialista
médico

Dr./Dra. Larraitz Ortega Álvarez

Lugar dónde se realiza
el diagnóstico

Hospital Sagrat Cor

Botón para cerrar la
sesión

Cargar imagen

Borrar

Diagnóstico

Botón para acceder a
las instrucciones de
BrainSoft



Instrucciones




Cerrar sesión



D-TEK

Imagen
MRI del
paciente

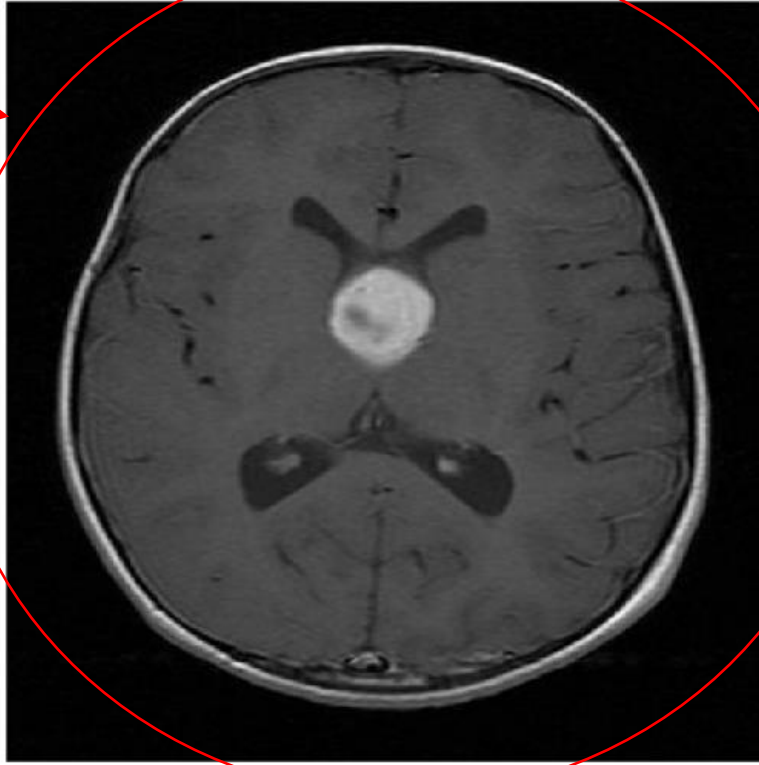

ID Paciente

7856

ID Imagen

74

Fecha de diagnóstico

11.06.2023

Cargar imagen

Borrar

Botón para comenzar
el procedimiento de
diagnóstico

Diagnóstico

Botón para eliminar
todo la información

Dr./Dra.

Larraitz Ortega Álvarez

Hospital

Sagrat Cor



Instrucciones



Cerrar sesión

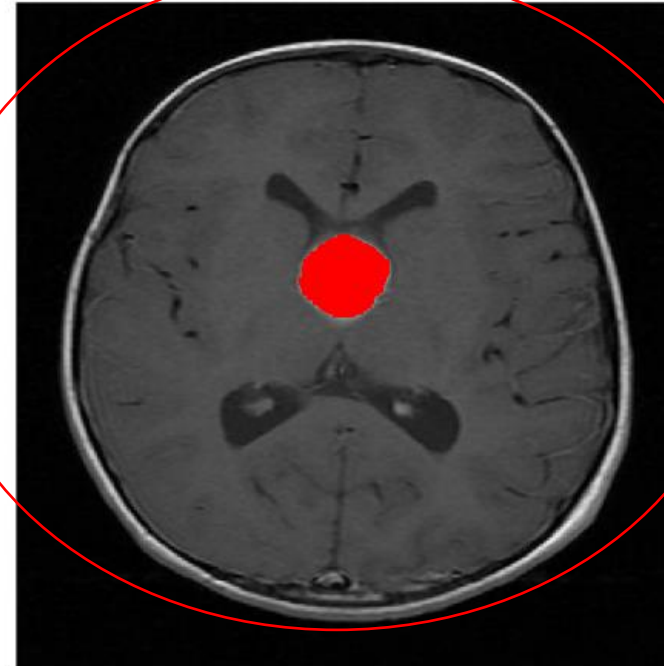
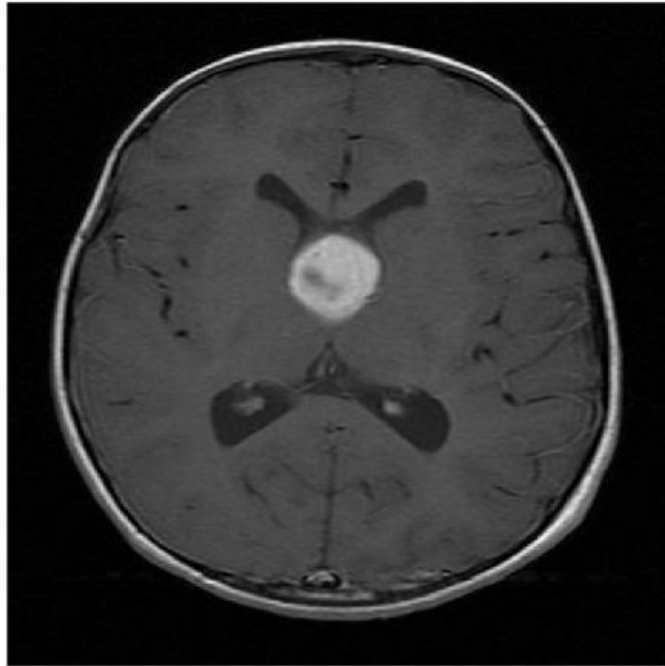


Imagen segmentada (el tumor está señalado de color rojo)

Subtipo de tumor

Diagnosticar

Botón para acceder a los datos específicos del tumor

Datos

Resultado Con tumor

Tipo Meningioma

Resultado del diagnóstico:
"Con tumor"
"Sin tumor"




Instrucciones



Cerrar sesión



Información detallada
sobre el tumor

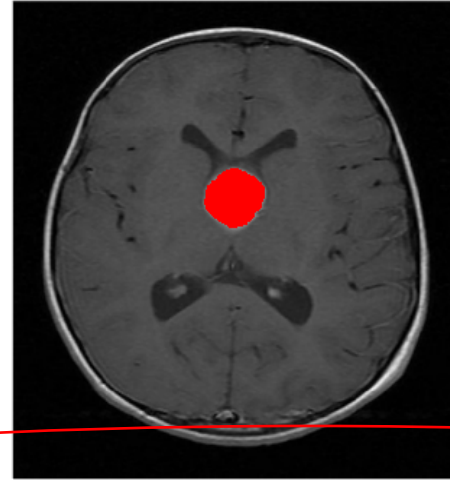

Area total	Circularidad	Excentricidad	Densidad	Color	Convexidad	Perimetro	Posición X	Posición Y	Intensidad media	Contraste	Homogeneidad
4253	0.89399	0.89399	0.96767	Claro	5073	262.685	310.6172	260.0623	1.1095	158.8421	0.99926

Espacio para escribir

NOTAS

Botón para volver a la
ventana de elegir

Guardar datos en excel

Botón para generar un
Excel con la información
del diagnóstico



Instrucciones

Volver



Cerrar sesión

ID Paciente	ID Imagen	Fecha de diagnostico	Area	Circularidad	Excentricidad	Densidad	Color	Convexidad	Perimetro	Posición X	Posición Y	Intensidad
7	4	11.06.2023	4253	0.89399	0.89399	0.96767	Claro	5073	262685	3106172	2600623	1
7856	10	11.06.2023	7176	0.8869	0.8869	0.97595	Claro	8234	337433	3162344	2641821	0.

Tabla de los diagnósticos
realizados y guardados en
el Excel

Botón para volver a la
ventana de elegir



Instrucciones

Volver



Cerrar sesión